
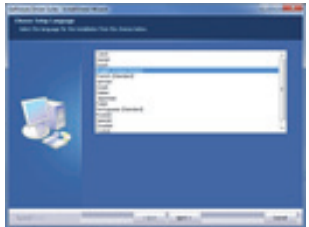
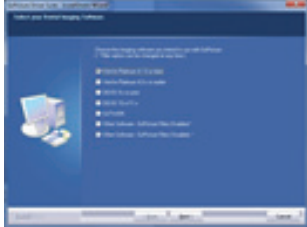

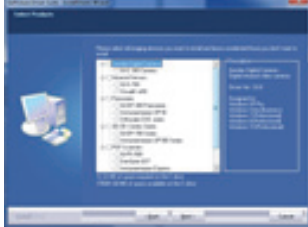
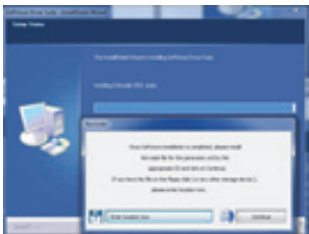
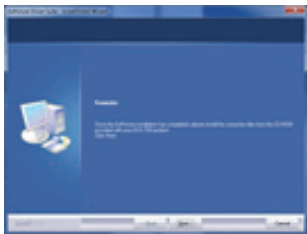




Quick Installation Guide for Gendex Software Driver (GxPicture™)

IMPORTANT: Before installing the GxPicture software driver, ensure the following:

- Temporarily disable any software, including antivirus software that may be running and may restrict access to computer resources (e.g. USB ports).
- Do not plug in any KaVo/Gendex digital device.
- For installation, you must login using an MS Windows system administrator account.
- VixWin Platinum users only: Upgrade VixWin Platinum software to the latest compatible version.
- Have installed all the latest service packs required by your Windows Operating System.

To install the GxPicture driver software either as a new installation or as an upgrade, do the following:

	<p>1. Insert the GxPicture Driver CD into the CD-ROM drive. <i>If the AutoPlay menu does not appear after a few moments, click the Start button, then select Run, and type D:\REV#GxPicture.exe (where D is the letter of the CD drive and REV# is GxPicture revision number). If the CD drive letter is not known, double click 'My computer' icon on the desktop, and make a note of the letter of the CD drive icon</i></p>		
<p>2. From the "Choose Setup Language" menu select the language for the installation and click Next.</p> 	<p>3. Select your Dental Imaging Software and click Next. Then click Install on the next screen.</p> 	<p>4. From the "Welcome" menu click Next. Read the "Software License Agreement" and click Yes to accept.</p> 	<p>5. Select the products to install/upgrade and click Next. Then click Install on the next screen.</p> 
<p>6. When installing GxPicture for a panoramic unit, you may be asked to install the mask file.</p> 	<p>7. Installing the GXS-700 also prompts to install the correction files from a separate CD at the end of the installation.</p> 	<p>8. When installing the GXC-300 or GXS-700, a prompt to plug the device into a USB port is displayed.</p> 	<p>9. After all files are installed click Next to complete the installation and reboot.</p> 

NOTE: When installing an Orthoralix DDE unit, install the Digital Module Unit Configuration CD after GxPicture installation is complete.

When upgrading previous versions of GxPicture, all existing KaVo/Gendex drivers are automatically detected and upgraded to the newest version. To add new devices, insert the GxPicture CD again after the version upgrade.



1910 North Penn Road
 Hatfield, PA 19440 USA
 Customer Service: 1-800-323-8029
 Technical Support: 1-800-769-2909
 Fax 1-877-292-6050
 www.gendex.com


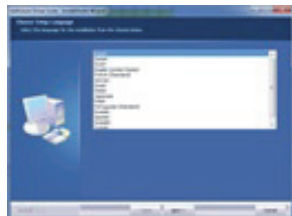



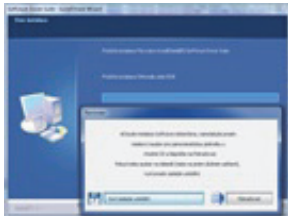



032-0228P1 Rev 11

Stručná instalační příručka pro softwarový ovladač Gendex (GxPicture™)

Varování: Před instalací softwarového ovladače GxPicture zajistěte následující:

- Přechodně ukončete jakýkoli software, včetně antivirového softwaru, který by mohl běžet a omezovat přístup ke zdrojům počítače (např. USB porty).
- Nepřipojujte žádný digitální přístroj společnosti KaVo/Gendex.
- Pro instalaci se musíte přihlásit pomocí systémového administrátorského účtu MS Windows.
- Jen pro uživatele aplikace VixWin Platinum: Upgradujte software VixWin Platinum na nejnovější dostupnou verzi.
- Nechte si nainstalovat všechny nejnovější opravné balíčky, požadované vaším operačním systémem Windows.

Instalaci softwarového ovladače GxPicture jako novou instalaci nebo upgrade proveďte takto:

	<p>1. Vložte CD s ovladačem GxPicture do CD-ROM jednotky počítače. Pokud se za krátký okamžik neobjeví nabídka automatického spuštění, klepněte na tlačítko Start, potom zvolte Run (Spustit), a zadejte D:\REV#GxPicture.exe (kde D je písmeno CD jednotky a REV# je číslo revize GxPicture). Pokud neznáte písmeno vaší CD jednotky, poklepejte na ikoně 'My Computer (Můj počítač)' na ploše a poznamenejte si písmeno na ikoně CD jednotky.</p>			
<p>2. Z nabídky "Choose Setup Language (Zvolte jazyk instalace)" zvolte jazyk instalace a klepněte na Next (Další).</p> 	<p>3. Zvolte Váš zubní snímkovací software a klikněte na Next (Další). Pak klikněte na Install (Instalovat) na další obrazovce.</p> 	<p>4. Z nabídky "Welcome (Vítejte)" klepněte na Next (Další). Přečtěte si "Softwarovou licenční smlouvu" a klepnutím na Yes (Ano) přijměte podmínky smlouvy.</p> 	<p>5. Zvolte produkty, které chcete instalovat/upgradovat a klepněte na Next (Další). Pak klikněte na Install (Instalovat) na další obrazovce.</p> 	
<p>6. Pokud instalujete ovladač GxPicture pro panoramatickou jednotku, můžete být požádáni o instalaci maskového souboru.</p> 	<p>7. Instalace přístroje GXS-700 také vyzve k instalaci opravných souborů z dalšího CD na konci instalace.</p> 	<p>8. Pokud instalujete přístroj GXC-300 nebo GXS-700, zobrazí se výzva k připojení přístroje do USB portu.</p> 	<p>9. Po instalaci všech souborů dokončete instalaci klepnutím na Next (Další) a restartujte počítač.</p> 	

Poznámky: Pokud instalujete jednotku Orthoralix DDE, instalujte CD pro konfiguraci digitálního modulu po dokončení instalace ovladače GxPicture. Po dokončení instalace používejte standardní uživatelský účet.


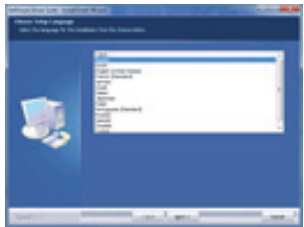
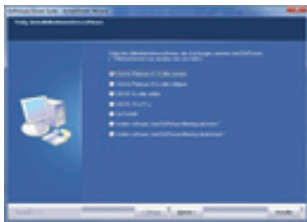
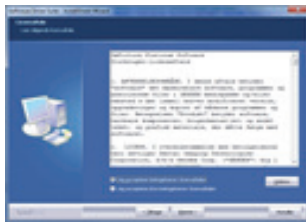

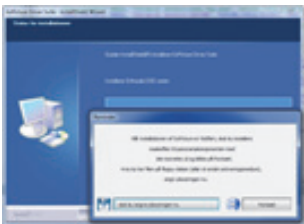
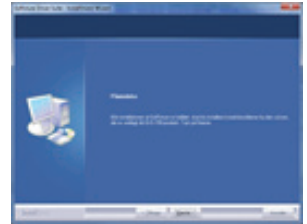

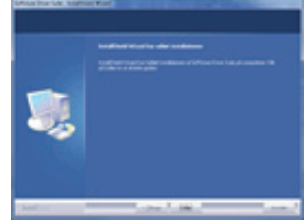
Pokud upgradujete předchozí verze ovladače GxPicture, všechny předchozí ovladače společnosti KaVo/Gendex jsou automaticky detekovány a upgradovány na nejnovější verze. Chcete-li přidat nové přístroje, vložte znovu GxPicture CD po upgradu verze.

Kort installationsvejledning til Gendex softwaredriver (GxPicture™)

Advarsel: Sørg for følgende inden installation af GxPicture softwaredriver:

- Deaktiver midlertidigt al software, inklusive antivirusprogrammer, der kører og eventuelt begrænser adgang til computerens ressourcer (f.eks. USB-porte).
- Undlad at tilslutte KaVo/Gendex digitalt udstyr.
- For at installere skal du logge på som MS Windows systemadministrator.
- Kun for brugere af VixWin Platinum: Opgrader VixWin Platinum softwaren til den seneste version.
- Sørg for at have installeret alle de seneste servicepakker, som Windows operativsystemet har brug for.

Gør følgende for at installere GxPicture driversoftwaren som enten en ny installation eller som en opgradering:

<div></div> <div>1. Sæt GxPicture Driver cd'en i cd-rom-drevet. <i>Hvis menuen Autoplay (Automatisk afspilning) ikke åbner efter et par sekunder, skal du klikke på Start, vælge Run (Kør) og skrive D:\REV#GxPicture.exe (hvor D er bogstavet for cd-drevet, og REV# er GxPicture revisionsnummeret). Hvis du ikke kender cd-drevets bogstav, skal du dobbeltklikke på ikonet 'My computer' på skrivebordet og notere bogstavet for cd-drevets ikon.</i></div>			
<div>2. På menuen "Choose Setup Language" (Vælg installationssprog) skal du vælge sprog for installationen og klikke på Next (Næste).</div> <div></div>	<div>3. Vælg dentalbilledannelses-software, og klik på Next (Næste). Klik dernæst på Install (Installation) på næste skærmbillede.</div> <div></div>	<div>4. Klik på Next i menuen "Welcome" (Velkommen). Læs "Software License Agreement" (Licensaftale) og klik på Yes (Ja) for at acceptere og fortsætte.</div> <div></div>	<div>5. Vælg de produkter, der skal installeres/opgraderes og klik på Next (Næste). Klik dernæst på Install (Installation) på næste skærmbillede.</div> <div></div>
<div>6. Hvis GxPicture installeres til et panorama-apparat, kan du blive bedt om at installere maskefilen.</div> <div></div>	<div>7. Installationen af GXS-700 åbner også en prompt om at installere korrektionsfilerne fra en separat cd i slutningen af installationen.</div> <div></div>	<div>8. Hvis GXC-300 eller GXS-700 installeres, åbner en prompt om at koble apparatet til en USB-port.</div> <div></div>	<div>9. Når alle filer er installeret, skal du klikke på Next (Næste) for at fuldføre installationen og genstarte.</div> <div></div>

Bemærkninger: Hvis du installerer et Orthoralix DDE-apparat, skal du installere "Digital Module Unit Configuration CD", når installationen af GxPicture er færdig. Brug en almindelig brugerkonto, når installationen er færdig.


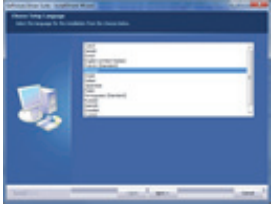
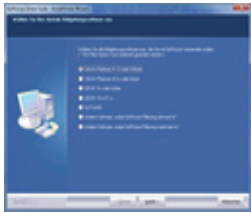


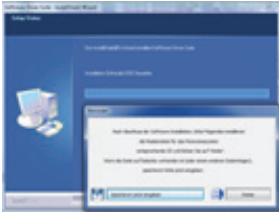


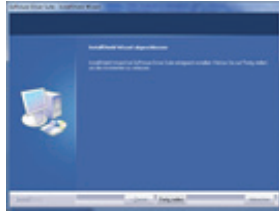
Hvis du opgraderer tidligere versioner af GxPicture, slettes alle eksisterende KaVo/Gendex drivere automatisk og opgraderes til den nyeste version. Sæt GxPicture cd'en i igen efter opgradering til den nye version for at tilføje nye apparater.

Kurzanleitung für die Installation des Gendex Software-Treibers (GxPicture™)

Warnung: Stellen Sie vor der Installation des GxPicture-Software-Treibers Folgendes sicher:

- Deaktivieren Sie vorübergehend sämtliche Software, einschließlich Antiviren-Software, die evtl. ausgeführt wird und den Zugang zu Computer-Ressourcen (z. B. USP-Ports) beschränken könnte.
- Schließen Sie keinerlei KaVo-/Gendex-Digitalgeräte an.
- Zur Installation müssen Sie sich als MS Windows Administrator anmelden.
- Nur für Anwender von VixWin Platinum: Aktualisieren Sie die VixWin Platinum-Software auf die aktuellste verfügbare Version.
- Achten Sie darauf, dass die für Ihr Windows-Betriebssystem erforderlichen neuesten Service-Packs installiert sind.

Gehen Sie bei der Installation der GxPicture-Treiber-Software, entweder als Erstinstallation oder als Aktualisierung, folgendermaßen vor:

<p>1. Legen Sie die beigegefügte Installations-CD-ROM für den GxPicture-Treiber in das CD-ROM-Laufwerk ein.</p> <p><i>Wenn das AutoPlay-Menü nicht nach einigen Augenblicken angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Start, wählen Sie dann Run (Ausführen) und geben Sie D:\REV#GxPicture.exe (wobei D der Laufwerksbuchstabe für das CD-Laufwerk und REV# die GxPicture-Versionsnummer ist) ein. Wenn Ihnen der Buchstabe des CD-Laufwerks nicht bekannt ist, doppelklicken Sie auf das Symbol „Computer“ auf dem Desktop und notieren Sie sich den Buchstaben des CD-Laufwerkssymbols.</i></p> 				
<p>2. Wählen Sie aus dem Menü „Choose Setup Language (Setup-Sprache auswählen)“ die Sprache für die Installation aus und klicken Sie auf Next (Weiter).</p> 	<p>3. Wählen Sie Ihre Dental-Bildgebungssoftware aus und klicken Sie auf Next (Weiter). Klicken Sie dann auf Install (Installieren) auf dem nächsten Bildschirm.</p> 	<p>4. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf Next (Weiter). Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Yes (Ja), um sie zu akzeptieren.</p> 	<p>5. Wählen Sie die zu installierenden bzw. zu aktualisierenden Produkte aus und klicken Sie auf Next (Weiter). Klicken Sie dann auf Install (Installieren) auf dem nächsten Bildschirm.</p> 	
<p>6. Wenn Sie GxPicture für ein Panoramasystem installieren, werden Sie u. a. aufgefordert, die Maskendatei zu installieren.</p> 	<p>7. Bei der Installation des GXS-700 werden Sie außerdem aufgefordert, nach Abschluss der Installation die Korrekturdateien von einer separaten CD zu installieren.</p> 	<p>8. Bei der Installation eines GXC-300 oder einer GXS-700 werden Sie aufgefordert, das Gerät an einen USB-Port anzuschließen.</p> 	<p>9. Wenn alle Dateien installiert sind, klicken Sie auf Next (Weiter), um die Installation abzuschließen und den Computer neu zu starten.</p> 	

Hinweise: Wenn Sie die Orthoralix DDE-Einheit installieren, installieren Sie nach der Installation von GxPicture die CD „Digital Module Unit Configuration (Konfiguration der Digitalmoduleinheit)“. Verwenden Sie nach Abschluss der Installation ein Standardbenutzerkonto.


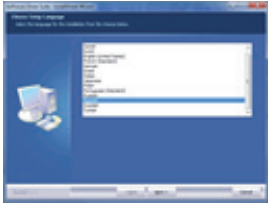


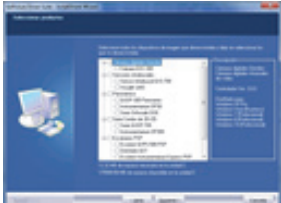
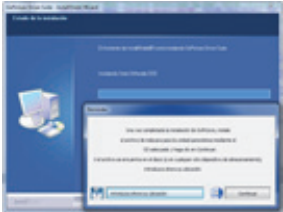
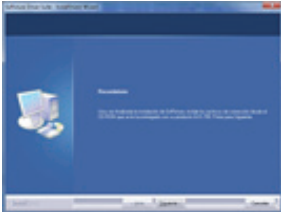

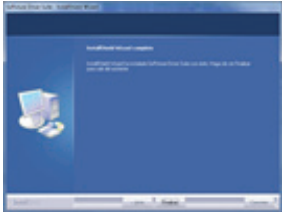
Bei der Aktualisierung von GxPicture werden automatisch alle vorhandenen KaVo-/Gendex-Treiber erkannt und auf die neueste Version aktualisiert. Wenn Sie neue Geräte hinzufügen möchten, legen Sie nach der Versionsaktualisierung die GxPicture-CD erneut ein.

Guía de instalación rápida del controlador del programa informático de Gendex (GxPicture™)

Aviso: Antes de instalar el controlador del programa informático GxPicture, cerciőrese de lo siguiente:

- Desactive temporalmente cualquier programa informático, incluido el programa antivirus que pueda estar ejecutándose y que pueda restringir el acceso a los recursos del ordenador (por ejemplo, puertos USB).
- No conecte ningún dispositivo digital KaVo/Gendex.
- Para la instalación, debe iniciar la sesión por medio de una cuenta de administrador del sistema MS Windows.
- Sólo para usuarios de VixWin Platinum: Actualice el programa informático VixWin Platinum a la última versión disponible.
- Debe haber instalado todas las últimas actualizaciones (service pack) requeridos por su sistema operativo Windows.

Para instalar el programa informático del controlador de GxPicture como instalación nueva o como actualización, siga los siguientes pasos:

<div></div> <div><p>1. Introduzca el CD del controlador de GxPicture Driver en la unidad de CD-ROM.</p><p><i>Si el menú de ejecución automática (AutoPlay) no aparece después de unos momentos, haga clic en el botón Inicio; luego, seleccione Run (Ejecutar), y escriba D:\REV#GxPicture.exe (donde D es la letra de la unidad de CD y REV# es el número de revisión de GxPicture). Si se desconoce la letra de la unidad de CD, haga doble clic en el icono “My Computer (Mi PC)” del escritorio y tome nota de la letra del icono de la unidad de CD.</i></p></div>			
<div><p>2. En el menú “Choose Setup Language (Elegir idioma de instalación)”, seleccione el idioma para la instalación y haga clic en Next (Siguiente).</p></div> <div></div>	<div><p>3. Seleccione su software de generación de imágenes dentales y haga clic en Next (Siguiente). Haga clic en Install (Instalar) en la pantalla siguiente.</p></div> <div></div>	<div><p>4. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente). Lea el contrato de licencia del programa y haga clic en Yes (Si) para aceptar la licencia y continuar.</p></div> <div></div>	<div><p>5. Seleccione los productos que va a instalar o actualizar, y haga clic en Next (Siguiente). Haga clic en Install (Instalar) en la pantalla siguiente.</p></div> <div></div>
<div><p>6. Si se instalando GxPicture para un equipo panorámico, tal vez se le pida que instale el archivo de máscara.</p></div> <div></div>	<div><p>7. La instalación del GXS-700 también da un aviso para instalar los archivos de corrección desde un CD separado al final de la instalación.</p></div> <div></div>	<div><p>8. Si se instalando GXC-300 o GXS-700, aparece un mensaje para enchufar el dispositivo en un puerto USB.</p></div> <div></div>	<div><p>9. Después de instalar todos los archivos, haga clic en Next (Siguiente) para finalizar la instalación y reiniciar el equipo.</p></div> <div></div>

NOTAS: Si se instala una unidad Orthoralix DDE, instale el CD de configuración de la unidad del módulo digital después de finalizar la instalación de GxPicture. Una vez finalizada la instalación, use una cuenta de usuario estándar.


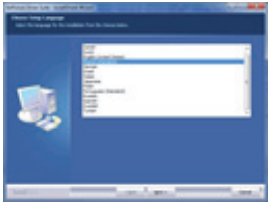
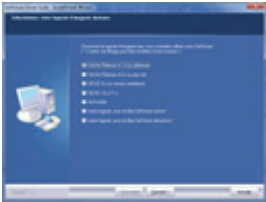


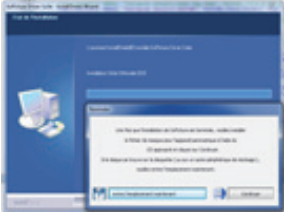
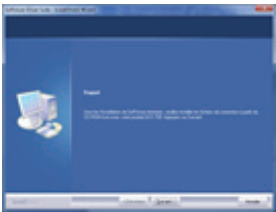
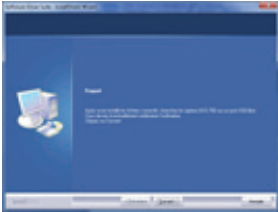
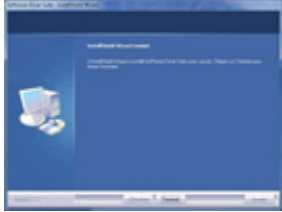
Si se actualizan versiones anteriores de GxPicture, todos los controladores existentes de KaVo/Gendex se detectan automáticamente y se actualizan a la versión más reciente. Para añadir dispositivos nuevos, vuelva a colocar en la unidad el CD de GxPicture después de actualizar la versión.

Guide d'installation rapide pour le pilote du logiciel Gendex (GxPicture™)

Avertissement : Avant d'installer le pilote du logiciel GxPicture, effectuez les vérifications/opérations suivantes :

- Désactivez provisoirement tous les programmes, notamment les logiciels antivirus, susceptibles de restreindre l'accès aux ressources de l'ordinateur (ports USB par exemple).
- Ne branchez pas de périphérique numérique KaVo/Gendex.
- Pour l'installation, vous devez vous identifier en tant qu'administrateur système MS Windows.
- Utilisateurs de VixWin Platinum uniquement : Installez la version la plus récente du logiciel VixWin Platinum.
- Installez toutes les dernières mises à jour requises par votre système d'exploitation Windows.

Pour une première installation ou une mise à niveau du logiciel de pilote GxPicture, procédez comme suit :

<div></div> <div><p>1. Insérez le CD-ROM du pilote GxPicture dans le lecteur de CD-ROM.</p><p><i>Si le menu d'exécution automatique n'apparaît pas après quelques instants, cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Exécuter et tapez D:\REV#GxPicture.exe (D correspondant à la lettre du lecteur de CD-ROM et REV# au numéro de révision de GxPicture). Si vous ne connaissez pas la lettre du lecteur de CD-ROM, double-cliquez sur l'icône Poste de travail sur le bureau et notez la lettre correspondant à l'icône du lecteur de CD-ROM.</i></p></div>				
<div><p>2. Dans le menu "Choose Setup Language" (Choisir la langue du menu), sélectionnez la langue utilisée pour l'installation et cliquez sur Next (Suivant).</p></div> <div></div>	<div><p>3. Sélectionnez votre logiciel d'imagerie dentaire et cliquez sur Next (Suivant). Cliquez ensuite sur Install, sur l'écran suivant.</p></div> <div></div>	<div><p>4. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur Next (Suivant). Lisez le contrat de licence du logiciel et cliquez sur Yes (Oui) pour l'accepter et poursuivre.</p></div> <div></div>	<div><p>5. Sélectionnez les produits à installer/mettre à niveau et cliquez sur Next (Suivant). Cliquez ensuite sur Install, sur l'écran suivant.</p></div> <div></div>	
<div><p>6. Lors de l'installation de GxPicture pour un appareil panoramique, il peut vous être demandé d'installer le fichier de masque.</p></div> <div></div>	<div><p>7. Pour installer le GXS-700, vous devez également installer des fichiers correctifs à partir d'un autre CD-ROM à la fin de l'installation.</p></div> <div></div>	<div><p>8. Lors de l'installation de GXC-300 ou GXC-700, un message vous demandant de brancher le périphérique sur un port USB s'affiche.</p></div> <div></div>	<div><p>9. Une fois tous les fichiers installés, cliquez sur Next (Suivant) pour terminer le processus et redémarrer.</p></div> <div></div>	

Remarques: Lors de l'installation d'un dispositif Orthoralix DDE, exécutez le CD-ROM de configuration du module numérique une fois l'installation de GxPicture terminée. Utilisez un compte d'utilisateur standard après avoir terminé l'installation.

Si vous mettez à niveau des versions antérieures de GxPicture, tous les pilotes KaVo/Gendex existants sont automatiquement détectés et mis à niveau vers la nouvelle version. Pour ajouter des périphériques, insérez à nouveau le CD-ROM de GxPicture après la mise à niveau.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης για το πρόγραμμα οδήγησης λογισμικού Gendex (GxPicture™)

Προειδοποίηση: Προτού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης λογισμικού GxPicture, φροντίστε να κάνετε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε προσωρινά οποιοδήποτε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού προστασίας από ιούς που ενδέχεται να εκτελείται, το οποίο ενδέχεται να περιορίζει την πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή (π.χ. θύρες USB).
- Μη συνδέετε καμία ψηφιακή συσκευή KaVo/Gendex.
- Για την εγκατάσταση, πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή συστήματος των MS Windows.
- Μόνο για χρήστες του VixWin Platinum: Αναβαθμίστε το λογισμικό VixWin Platinum στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση.
- Εγκαταστήστε όλα τα τελευταία Service Pack που απαιτούνται από το λειτουργικό σύστημα Windows που διαθέτετε.

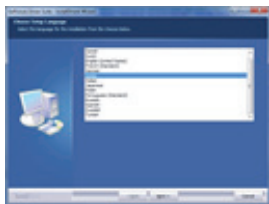
Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος οδήγησης GxPicture ως νέα εγκατάσταση ή ως αναβάθμιση, κάντε τα εξής:

1. Τοποθετήστε το CD του προγράμματος οδήγησης GxPicture στη μονάδα CD-ROM.



Αν δεν εμφανιστεί μετά από λίγο το μενού αυτόματης αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε **Run (Εκτέλεση)** και πληκτρολογήστε **D:\REV#GxPicture.exe** (όπου το D είναι το γράμμα της μονάδας CD και το REV# είναι ο αριθμός αναθεώρησης του GxPicture). Αν δεν γνωρίζετε το γράμμα της μονάδας CD, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 'My Computer (Ο υπολογιστής μου)' στην επιφάνεια εργασίας και σημειώστε το γράμμα στο εικονίδιο της μονάδας CD.

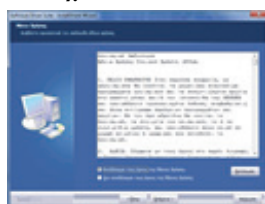
2. Από το μενού "Choose Setup Language (Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης)", επιλέξτε τη γλώσσα για την εγκατάσταση και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).



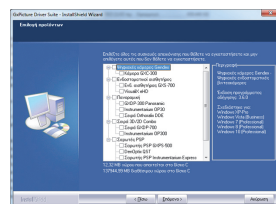
3. Επιλέξτε το οδοντιατρικό λογισμικό απεικόνισης που διαθέτετε και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) στην επόμενη οθόνη.



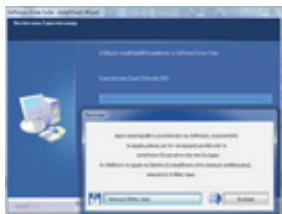
4. Στο μενού υποδοχής, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Διαβάστε την "Άδεια χρήσης του λογισμικού" και κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να την αποδεχτείτε και να συνεχίσετε.



5. Επιλέξτε τα προϊόντα για εγκατάσταση/αναβάθμιση και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση) στην επόμενη οθόνη.



6. Αν κάνετε εγκατάσταση του GxPicture για μια πανοραμική μονάδα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το αρχείο μάσκας.



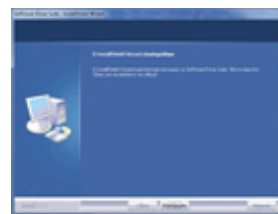
7. Η εγκατάσταση του GXS-700 εμφανίζει επίσης μια προτροπή να εγκαταστήσετε τα αρχεία διόρθωσης από ένα ξεχωριστό CD στο τέλος της εγκατάστασης.



8. Κατά την εγκατάσταση του GXC-300 ή του GXS-700, εμφανίζεται μια προτροπή να συνδέσετε τη συσκευή σε μια θύρα USB.



9. Αφού εγκατασταθούν όλα τα αρχεία, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί ο υπολογιστής.



Σημειώσεις: Όταν κάνετε εγκατάσταση μιας μονάδας Orthoralix DDE, εγκαταστήστε το CD διαμόρφωσης ψηφιακής μονάδας αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του GxPicture. Χρησιμοποιήστε έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.





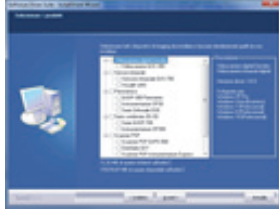
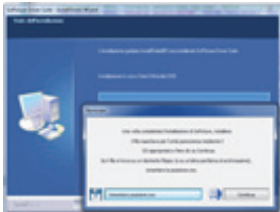
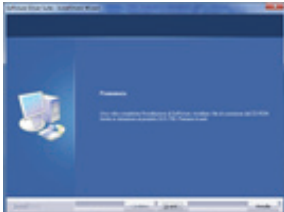
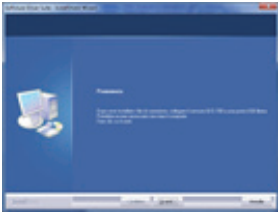
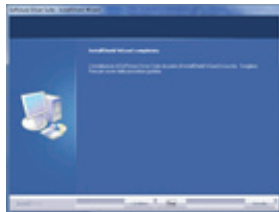
Όταν κάνετε αναβάθμιση προηγούμενων εκδόσεων του GxPicture, ανιχνεύονται αυτόματα και αναβαθμίζονται στην τελευταία έκδοση όλα τα υφιστάμενα προγράμματα οδήγησης KaVo/Gendex. Για να προσθέσετε νέες συσκευές, τοποθετήστε ξανά το CD του GxPicture μετά την αναβάθμιση της έκδοσης.

Guida di installazione rapida per il driver del software Gendex (GxPicture™)

Avvertenza: prima di installare il driver del software GxPicture, osservare le seguenti indicazioni:

- Disabilitare temporaneamente tutti i software in esecuzione, compresi i software antivirus, che potrebbero limitare l'accesso alle risorse del computer (ad es. porte USB).
- Non collegare alcun dispositivo digitale KaVo/Gendex.
- Per l'installazione, occorre accedere al sistema utilizzando un account di amministratore di MS Windows.
- Solo per gli utenti che utilizzano VixWin Platinum: aggiornare il software VixWin Platinum all'ultima versione disponibile.
- Accertarsi che siano stati installati tutti i più recenti Service Pack necessari per il proprio sistema operativo Windows.

Per installare il software del driver GxPicture, sia che si tratti di una nuova installazione, sia che si tratti di un aggiornamento, procedere come segue:

<div></div> <div><p>1. Inserire il CD del driver di GxPicture nel lettore di CD-ROM.</p><p><i>Se il menu AutoPlay non viene visualizzato nel giro di pochi secondi, fare clic sul pulsante Start (Avvio), quindi selezionare Run (Esegui) e digitare D:\REV#GxPicture.exe (in cui D è la lettera dell'unità CD e REV# è il numero di revisione di GxPicture). Se non si conosce la lettera dell'unità CD, fare doppio clic sull'icona 'My computer (Risorse del computer)' sul Desktop e annotare la lettera che contraddistingue l'icona dell'unità CD.</i></p></div>			
<div><p>2. Nel menu "Choose Setup Language (Seleziona la lingua dell'installazione)" selezionare la lingua desiderata per l'installazione e fare clic su Next (Avanti).</p></div> <div></div>	<div><p>3. Selezionare il software di imaging dentale e fare clic su Next (Avanti). Quindi fare clic su Installa (Install) nella schermata successiva.</p></div> <div></div>	<div><p>4. Nel menu "Welcome (Benvenuto)", fare clic su Next (Avanti). Leggere il "Contratto di licenza" e fare clic su Yes (Sì).</p></div> <div></div>	<div><p>5. Selezionare i prodotti da installare/aggiornare e fare clic su Next (Avanti). Quindi fare clic su Installa (Install) nella schermata successiva.</p></div> <div></div>
<div><p>6. Nel corso dell'installazione di GxPicture per un'unità panoramica, il sistema potrebbe chiedere di installare il file maschera.</p></div> <div></div>	<div><p>7. Nel corso dell'installazione dell'unità GXS-700, il sistema chiede anche di installare, al termine della procedura, i file di correzione dall'apposito CD.</p></div> <div></div>	<div><p>8. Se si sta installando l'unità GXC-300 o l'unità GXS-700, il sistema visualizza un messaggio che chiede di collegare il dispositivo alla porta USB.</p></div> <div></div>	<div><p>9. Una volta che tutti i file sono stati installati, fare clic su Next (Avanti) per completare la procedura e riavviare il computer.</p></div> <div></div>

NOTA: Per l'installazione di un'unità Orthoralix DDE, una volta completata l'installazione di GxPicture occorrerà installare il CD di configurazione dell'unità modulo digitale. Una volta completata l'installazione, è possibile utilizzare un account utente standard.

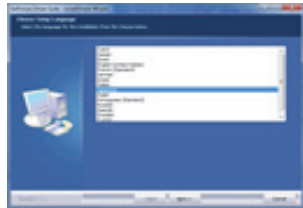
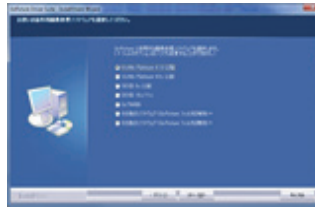




Quando si esegue l'aggiornamento di una versione precedente di GxPicture, tutti i driver KaVo/Gendex esistenti vengono automaticamente rilevati e aggiornati alla versione più recente. Per aggiungere nuovi dispositivi, dopo l'aggiornamento della versione inserire nuovamente il CD di GxPicture.

Gendex ソフトウェアドライバ (GxPicture™) 用クイックインストールガイド

警告 : GxPicture ソフトウェアドライバをインストールする前に、次の項目をチェックしてください。

- ソフトウェアはすべて一時的に無効にします。これには現在実行されている、コンピュータリソース (USB ポートなど) へのアクセスを制限することがあるウイルス対策ソフトウェアなどが含まれます。
- KaVo/Gendex デジタルデバイスは一切差し込まないでください。
- インストールするには、必ず Microsoft Windows システムの管理者アカウントを使ってログインしてください。
- VixWin Platinum ユーザーのみ : VixWin Platinum ソフトウェアは、手に入る最新バージョンにアップグレードします。
- お使いの Windows オペレーティングシステムに必要な最新サービスパックがすべてインストールされているようにします。

GxPicture ドライバソフトウェアを新規もしくはアップグレードとしてインストールするには、次の操作を行ってください。

	<p>1. GxPicture ドライバ CD を CD-ROM に挿入します。 しばらくしても [自動再生] メニューが表示されない場合、[スタート] ボタンをクリックしてから [実行] を選択し、「D:\REV#GxPicture.exe」と入力します。ここで「D」は CD ドライブのアルファベットを、「REV#」は GxPicture の改訂番号を示します。CD ドライブのアルファベットがわからない場合、デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD ドライブアイコンのアルファベットを書き留めます。</p>		
<p>2. [Choose Setup Language (設定言語の選択)] メニューで、インストールする言語を選択し [Next (次へ)] をクリックします。</p> 	<p>3. お使いの歯科用画像処理ソフトウェアを選択し Next [次へ] をクリックします。次の画面で Install [インストール] をクリックします。</p> 	<p>4. [Welcome (ようこそ)] メニューで [Next (次へ)] をクリックします。ソフトウェア使用許諾を読み、同意して続行するには [Yes (はい)]</p> 	<p>5. インストール / アップグレードする製品 (複数可) を選択し [Next (次へ)] をクリックします。次の画面で Install [インストール] をクリックします。</p> 
<p>6. パノラマユニットに GxPicture をインストールする場合、マスクファイルのインストールについて確認メッセージが表示されることがあります。</p> 	<p>7. GXS-700 をインストールすると、インストールの最後に別の CD から修正ファイルをインストールするようにとのメッセージも表示されます。</p> 	<p>8. GXC-300 か GXS-700 をインストールする場合、USB ポートにデバイスを差し込むようメッセージが表示されます。</p> 	<p>9. すべてのファイルがインストールされると [Next (次へ)] をクリックしてインストールを終了して再起動します。</p> 


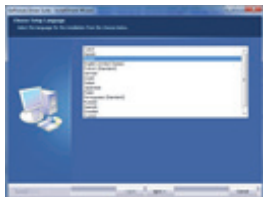
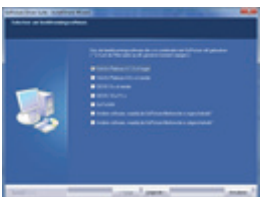


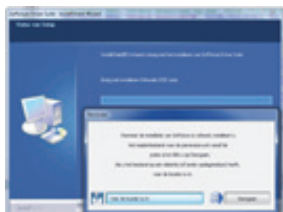

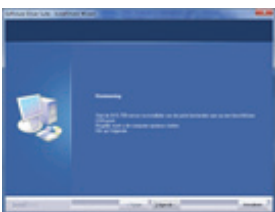
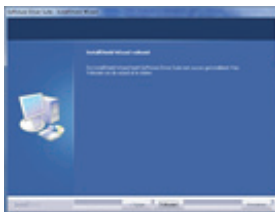
注 : Orthoralix DDE ユニットのインストールの際は、GxPicture のインストールが終了してから Digital Module Unit Configuration (デジタルモジュールユニット設定) の CD をインストールします。インストール終了後は標準のユーザーアカウントを使用します。
 GxPicture の旧バージョンをアップグレードすると、既存の KaVo/Gendex ドライバすべてが自動的に検出され、最新バージョンへとアップグレードされます。新しいデバイスを追加するには、バージョンアップグレード後に GxPicture の CD を挿入し直します。

Snelgids voor installatie van het Gendex-stuurprogramma (GxPicture™)

Waarschuwing: Zorg dat voorafgaande aan de installatie van het GxPicture-stuurprogramma aan het volgende wordt voldaan:

- Schakel alle software tijdelijk uit, inclusief antivirussoftware die wellicht wordt uitgevoerd en de toegang tot computerbronnen (bijv. USB-poorten) mogelijk beperkt.
- Zorg dat er geen digitaal KaVo/Gendex-apparaat is aangesloten.
- Bij installatie moet u zich aanmelden met een MS Windows-systeembeheerdersaccount.
- Alleen voor gebruikers van VixWin Platinum: Werk de VixWin Platinum-software bij naar de laatst beschikbare versie.
- Zorg dat de nieuwste servicepacks die vereist zijn voor uw Windows-besturingssysteem, zijn geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om het GxPicture-stuurprogramma als nieuwe installatie of upgrade te installeren:

	<p>1. Plaats de cd met het GxPicture-stuurprogramma in het cd-rom-station. <i>Als het menu Automatisch afspelen na enkele seconden niet verschijnt, doet u het volgende: klik op de knop Start, selecteer Run (Uitvoeren) en typ D:\RevnrGxPicture.exe (D is de letter van het cd-rom-station en Revnr is het GxPicture-revisienummer). Als u de letter van het cd-rom-station niet weet, dubbelklikt u op het bureaublad op het pictogram Deze computer, waar u de letter van het cd-rom-station ziet.</i></p>		
<p>2. In het menu Installatietaal kiezen selecteert u de taal voor de installatie en klikt u op Next (Volgende).</p> 	<p>3. Selecteer uw tandheelkundige beeldvormingssoftware en klik op Next (Volgende). Klik vervolgens op het volgende scherm op Install (Installeren).</p> 	<p>4. Klik in het menu Welkom op Next (Volgende). Lees de licentieovereenkomst en klik op Yes (Ja) om deze te accepteren en door te gaan.</p> 	<p>5. Selecteer welke producten u wilt installeren/bijwerken en klik op Next (Volgende). Klik vervolgens op het volgende scherm op Install (Installeren).</p> 
<p>6. Wanneer u GxPicture voor een panorama-unit installeert, wordt u mogelijk verzocht om het maskerbestand te installeren.</p> 	<p>7. Bij installatie van de GXS-700 wordt u ook verzocht om aan het einde van de installatie de correctiebestanden van een aparte cd te installeren.</p> 	<p>8. Wanneer u de GXC-300 of GXS-700 installeert, wordt u verzocht om het apparaat op een USB-poort aan te sluiten.</p> 	<p>9. Na installatie van alle bestanden klikt u op Next (Volgende) om de installatie te voltooien en opnieuw op te starten.</p> 

Opmerkingen: Zorg bij installatie van een Orthoralix DDE-apparaat dat de GxPicture-installatie is voltooid voordat u de configuratie-cd voor de digitale module-eenheid installeert. Gebruik na voltooiing van de installatie een standaard gebruikersaccount.


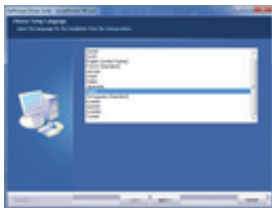

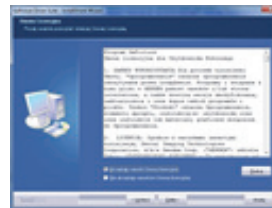

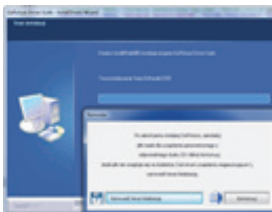
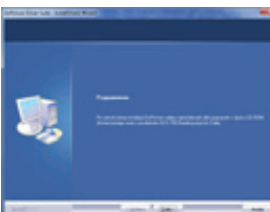

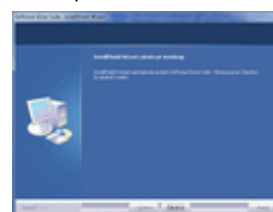
Wanneer u een oudere GxPicture-versie bijwerkt, worden alle bestaande KaVo/Gendex-stuurprogramma's automatisch gedetecteerd en bijgewerkt naar de nieuwste versie. Als u nieuwe apparaten wilt toevoegen, plaatst u de GxPicture-cd na de versie-upgrade opnieuw in het cd-rom-station.

Skrócony podręcznik instalacji sterownika oprogramowania Gendex (GxPicture™)

Ostrzeżenie: Przed zainstalowaniem sterownika oprogramowania GxPicture należy wykonać następujące czynności:

- Tymczasowo wyłączyć wszelkie oprogramowanie, w tym również z oprogramowanie antywirusowe, które może działać i ograniczać dostęp do zasobów komputera (np. portów USB).
- Nie podłączać żadnych urządzeń cyfrowych KaVo/Gendex.
- Aby dokonać instalacji, konieczne jest zalogowanie się przy użyciu konta administratora systemu MS Windows.
- Tylko dla użytkowników VixWin Platinum: Uaktualnić oprogramowanie VixWin Platinum do najnowszej dostępnej wersji.
- Zainstalować wcześniej wszystkie najnowsze pakiety Service Pack wymagane przez posiadany system operacyjny Windows.®

Aby zainstalować sterownik oprogramowania GxPicture jako nową instalację lub jako uaktualnienie, należy wykonać następujące czynności:

	<p>1. Umieścić dysk CD sterownika GxPicture w napędzie CD-ROM. <i>Jeżeli menu autoodtworzenia nie pojawi się po chwili, należy kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać Run (Uruchom) i wpisać D:\WERSJAGxPicture.exe (gdzie D jest literą napędu CD, a WERSJA jest numerem wersji GxPicture). Jeżeli litera napędu CD nie jest znana, należy kliknąć dwukrotnie ikonę „My Computer (Mój komputer)” na pulpicie i zanotować literę przy ikonie napędu CD.</i></p>		
<p>2. W menu „Choose Setup Language (Wybierz język instalacji)” należy wybrać język dla tej instalacji i kliknąć przycisk Next (Dalej).</p> 	<p>3. Wybrać oprogramowanie Dental Imaging Software i kliknąć Next (Dalej). Następnie kliknąć Install (Instaluj) na kolejnym ekranie.</p> 	<p>4. W menu „Welcome (Zapraszamy)” kliknąć przycisk Next (Dalej). Przeczytać „Software License Agreement (Umowę licencyjną na oprogramowanie)” i kliknąć przycisk Yes (Tak).</p> 	<p>5. Wybrać produkty do zainstalowania/uaktualnienia i kliknąć przycisk Next (Dalej). Następnie kliknąć Install (Instaluj) na kolejnym ekranie.</p> 
<p>6. Podczas instalacji GxPicture dla urządzenia panoramicznego użytkownik może zostać poproszony o zainstalowanie pliku maski.</p> 	<p>7. Instalacja GXS-700 również monitoruje o zainstalowanie plików korekcji z oddzielnego dysku CD po zakończeniu instalacji.</p> 	<p>8. Podczas instalacji GXC-300 lub GXS-700 wyświetlany jest monit o podłączenie urządzenia do portu USB.</p> 	<p>9. Po zainstalowaniu wszystkich plików należy kliknąć przycisk Next (Dalej), aby dokończyć instalację i uruchomić ponownie komputer.</p> 

Uwagi: Podczas instalacji urządzenia Orthoralix DDE, po zakończeniu instalacji GxPicture należy zainstalować dysk CD „Digital Module Unit Configuration (Konfiguracja jednostek modułu cyfrowego)”. Po zakończeniu instalacji należy używać standardowego konta użytkownika.


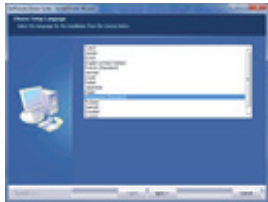



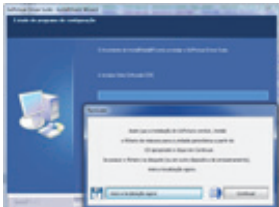
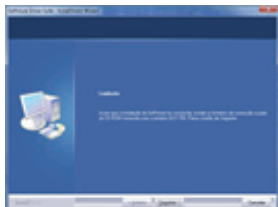
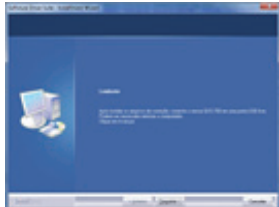
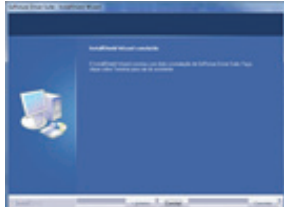
Podczas uaktualniania poprzednich wersji GxPicture wszystkie istniejące sterowniki KaVo/Gendex są automatycznie wykrywane i uaktualniane do najnowszej wersji. Aby dodać nowe urządzenia, po uaktualnieniu wersji należy ponownie umieścić dysk CD GxPicture w napędzie.

Guia rápido de instalação para driver do software Gendex (GxPicture™)

Aviso: Antes de instalar o driver do software GxPicture, verifique o seguinte:

- Desative temporariamente qualquer software, inclusive software antivírus em operação, que podem restringir o acesso aos recursos do computador (por exemplo: portas USB).
- Não conecte nenhum dispositivo digital KaVo/Gendex.
- Para instalar é preciso fazer login usando uma conta de administrador do sistema MS Windows.
- Usuários VixWin Platinum somente: atualize o software VixWin Platinum com a versão mais recente disponível.
- Certifique-se de que todos os Service Packs recentes do Windows estejam instalados.

Para instalar o driver do software GxPicture como nova instalação ou atualização, proceda do seguinte modo:

	<p>1. Insira o CD do driver GxPicture na unidade de CD-ROM.</p> <p><i>Se o CD não abrir automaticamente com a função de reprodução automática, clique no botão Iniciar, selecione Run (Executar) e digite D:\REV#GxPicture.exe (onde D é a letra da unidade de CD e REV# é o número de versão do GxPicture). Se a letra da unidade de CD não for conhecida, dê um duplo clique no ícone em 'My Computer (Meu computador)' na área de trabalho e verifique a letra da unidade de CD.</i></p>		
<p>2. No menu "Choose Setup Language (Escolha o idioma para instalação)", selecione o idioma de instalação e clique em Next (Seguinte).</p>	<p>3. Seleccione o seu software de imagiologia dentária e clique em Next (Seguinte). Clique em Install (Instalar) no ecrã seguinte.</p>	<p>4. No menu "Welcome (Bem-vindo)" clique em Next (Seguinte). Leia o "Software License Agreement (Contrato de Licença de Software)" e clique em Yes (Sim).</p>	<p>5. Seleccione os produtos a serem instalados ou atualizados e clique em Next (Seguinte). Clique em Install (Instalar) no ecrã seguinte.</p>
			
<p>6. Ao instalar GxPicture para uma unidade panorâmica, você deverá instalar o arquivo de máscara.</p>	<p>7. A instalação do GXS-700 também requer a instalação dos arquivos de correção de um CD separado ao final da instalação.</p>	<p>8. Se o GXC-300 ou GXS-700 for instalado, será exibida uma mensagem para conectar o dispositivo a uma porta USB.</p>	<p>9. Após instalar todos os arquivos, clique em Next (Seguinte) para concluir a instalação e reiniciar o computador.</p>
			

NOTAS: Ao instalar a unidade Orthoralix DDE, instale o CD de configuração da unidade do módulo digital após completar a instalação do GxPicture. Use uma conta de usuário padrão após a instalação.


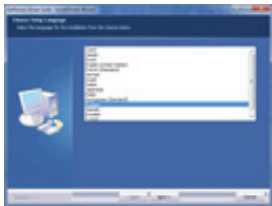

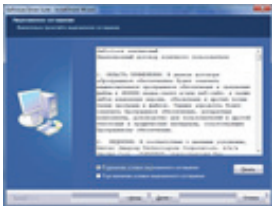
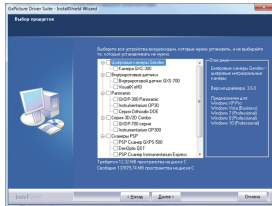
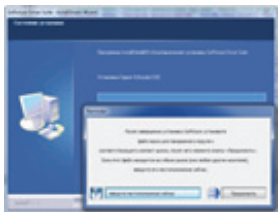


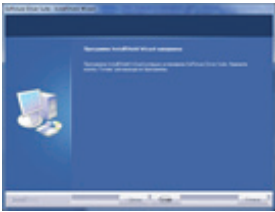
Ao instalar versões anteriores do GxPicture, todos os drivers do KaVo/Gendex serão detectados e atualizados automaticamente para a nova versão. Para adicionar novos dispositivos, insira o CD do GxPicture novamente após a atualização da versão.

Краткое руководство по установке программного драйвера Gendex (GxPicture™)

Внимание! Прежде чем устанавливать программный драйвер GxPicture, обязательно выполните следующее.

- Временно отключите все программное обеспечение (в том числе антивирусное), которое выполняется на компьютере и может ограничить доступ к ресурсам компьютера (например, портам USB).
- Не включайте какие-либо цифровые устройства KaVo/Gendex.
- Для установки необходимо войти в операционную систему MS Windows с учетной записью администратора.
- Только пользователи приложения VixWin Platinum: обновите программное обеспечение VixWin Platinum до последней доступной версии.
- Установите все последние пакеты обновления, требуемые вашей операционной системой Windows.®

Для установки драйвера GxPicture в виде новой программы или обновления выполните следующее.

<div></div> <div>1. Вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск GxPicture Driver CD. <i>Если через несколько секунд не появится меню автозапуска, нажмите кнопку «Start» (пуск), выберите команду Run (выполнить) и введите следующую строку: D:\REV#GxPicture.exe (где D — это буква дисковода CD-ROM, а REV# — это номер версии драйвера GxPicture). Если буква дисковода CD-ROM неизвестна, щелкните двойным щелчком значок «My computer» (мой компьютер) на рабочем столе и посмотрите букву рядом со значком дисковода CD-ROM.</i></div>			
<div>2. Из меню «Choose Setup Language» (выберите язык установки) выберите язык установки и нажмите кнопку Next (далее)</div> <div></div>	<div>3. Выберите нужное вам стоматологическое программное обеспечение для обработки изображений и нажмите Next (далее). Затем в следующем окошке нажмите Install (установить).</div> <div></div>	<div>4. В меню «Welcome» (приветствие) нажмите кнопку Next (далее). Прочтите «Software License Agreement» (лицензионное соглашение программного обеспечения) и нажмите кнопку Yes (да).</div> <div></div>	<div>5. Выберите продукты для установки/обновления и нажмите кнопку Next (далее). Затем в следующем окошке нажмите Install (установить).</div> <div></div>
<div>6. При установке программного обеспечения GxPicture для панорамного модуля от вас может потребоваться установка файла маски.</div> <div></div>	<div>7. При установке системы GXS-700 в конце также появится сообщение с предложением установить корректирующие файлы с отдельного компакт-диска.</div> <div></div>	<div>8. При установке системы GXC-300 или GXS-700 появится сообщение с предложением включить устройство в порт USB.</div> <div></div>	<div>9. После установки всех файлов нажмите кнопку Next (далее), чтобы завершить установку и перезагрузить систему.</div> <div></div>

Примечания: При установке модуля Orthoralix DDE после завершения установки драйвера GxPicture установите компакт диск «Digital Module Unit Configuration CD» (настройка цифрового модуля). После завершения установки используйте стандартную учетную запись пользователя.


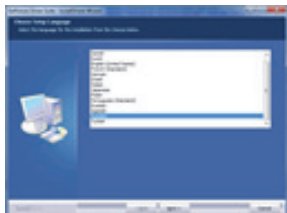



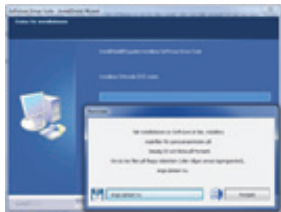
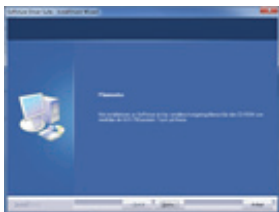
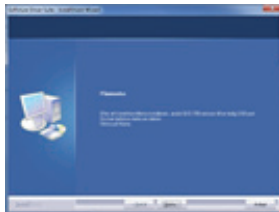
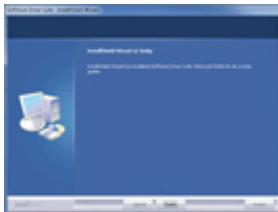
При обновлении предыдущих версий драйвера GxPicture все существующие драйверы KaVo/Gendex автоматически обнаруживаются и обновляются до последней версии. Чтобы добавить новые устройства, вставьте компакт-диск GxPicture еще раз после обновления версии.

Snabbinstallationsguide för Gendex drivrutin (GxPicture™)

Varning! Säkerställ följande innan du installerar GxPicture-drivrutinen:

- Stäng tillfälligt alla program, inklusive antivirusprogram som eventuellt kör och som kan begränsa åtkomsten till datorresurserna (t.ex. USB-portar).
- Koppla inte in någon KaVo/Gendex digital enhet.
- För installation måste du logga in med användning av ett MS Windows-systemadministratörskonto.
- Gäller endast VixWin Platinum-användare: Uppgradera VixWin Platinum-programvaran till den senaste version som finns tillgänglig.
- Se till att alla senaste servicepackar som krävs av ditt Windows operativsystem är installerade.

Gör följande för att installera GxPicture-drivrutinen, antingen som ny installation eller som uppgradering:

	<p>1. Sätt i CD-skivan med GxPicture Driver i CD-ROM-enheten. <i>Om AutoPlay-menyn inte visas efter några ögonblick, klicka på Start-knappen, välj Run (Kör) och skriv in D:\REV#GxPicture.exe (där D står för CD-enheten och REV# är revisionsnumret för GxPicture). Om du inte vet vilken bokstav din CD-enhet har dubbelklickar du på 'My computer (Min dator)'-ikonen på skrivbordet och ser efter vilken bokstav som anges bredvid CD-enhetens ikon.</i></p>		
<p>2. Välj det språk du vill använda för installationen i menyn "Choose Setup Language (Välj installationsspråk)" och klicka på Next (Nästa).</p>	<p>3. Markera din Dental Imaging-program och klicka på Next (Nästa). Klicka på Install (Installera) på nästa skärm.</p>	<p>4. Klicka på Next (Nästa) på menyn "Welcome (Välkommen)". Läs igenom "Software License Agreement (Slutanvändarens licensavtal)" och klicka på Yes (Ja).</p>	<p>5. Välj produkter som ska installeras/uppgraderas och klicka på Next (Nästa). Klicka på Install (Installera) på nästa skärm.</p>
			
<p>6. När du installerar GxPicture för en panoramaenhet kan det hända att du ombeds installera maskfilen.</p>	<p>7. När GXS-700 installeras visas även en uppmaning om att installera korrektionsfilerna från en separat CD-skiva, i slutet av installationen.</p>	<p>8. När GXC-300 eller GXS-700 installeras visas en uppmaning om att koppla in enheten i en USB-port.</p>	<p>9. Efter att alla filer har installerats, klicka på Next (Nästa) för att avsluta installationen och starta om datorn.</p>
			

Anmärkningar: När en Orthoralix DDE-enhet installeras ska CD-skivan med Digital Module Unit Configuration installeras efter att installationen av GxPicture är genomförd. Använd ett vanligt användarkonto när installationen är färdig.


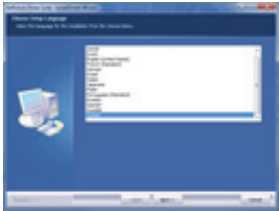



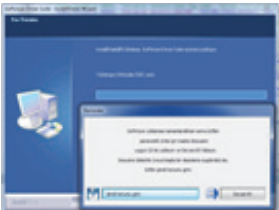


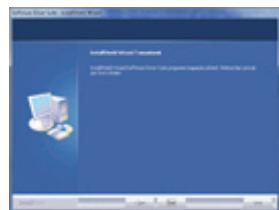
När tidigare versioner av GxPicture uppgraderas detekteras alla existerande KaVo/Gendex-drivrutiner automatiskt och uppgraderas till den nyaste versionen. För att lägga till nya enheter, sätt in GxPicture-CD-skivan igen efter versionsuppgraderingen.

Gendex Yazılım Sürücüsü için Hızlı Kurulum Kılavuzu (GxPicture™)

Uyarı: GxPicture yazılım sürücüsünü yüklemeyen önce aşağıdakileri yapın:

- Antivirüs yazılımı da dahil olmak üzere çalışmakta olan ve bilgisayar kaynaklarına (örneğin, USB bağlantı noktalarına) erişimi engelleyebilecek tüm yazılımları devre dışı bırakın.
- Herhangi bir KaVo/Gendex dijital cihazını takmayın.
- Yükleme için MS Windows sistem yöneticisi hesabı kullanarak giriş yapmanız gereklidir.
- Yalnızca VixWin Platinum kullanıcıları: VixWin Platinum yazılımını mevcut olan en son sürümüne yükseltin.
- Windows İşletim Sisteminiz tarafından gereksinim duyulan en son servis paketlerinin tümünü yükleyin.®

GxPicture sürücü yazılımını yeni bir kurulum veya üst sürüm olarak yüklemek için aşağıdakileri yapın:

	<p>1. GxPicture Sürücü CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Kısa süre sonra Otomatik Yürütme menüsü görüntülenmezse Başlat düğmesini tıklayın, ardından Run (Çalıştır) ı seçin ve D:\REV#GxPicture.exe yazın (burada D, CD sürücüsünün harfi REV# ise GxPicture revizyon numarasıdır). CD sürücü harfi bilinmiyorsa masaüstündeki 'My Computer (Bilgisayarım)' simgesini çift tıklayın ve CD sürücüsü harfini not edin.</p>		
<p>2. "Choose Setup Language (Kurulum Dilini Seçin)" menüsünden kurulum dilini seçin ve Next (İleri) düğmesini tıklayın.</p>	<p>3. Dental Görüntüleme Yazılımınızı seçin ve İleri (Next) üzerine tıklayın. Ardından sonraki ekranda Yükle (Install) üzerine tıklayın.</p>	<p>4. Yüklenecek/yükseltilecek ürünleri seçin ve Next (İleri) düğmesini tıklayın. Sürücü kurulumu, gerekli tüm dosyaları bilgisayara kopyalar.</p>	<p>5. Yüklenecek/yükseltilecek ürünleri seçin ve Next (İleri) düğmesini tıklayın. Ardından sonraki ekranda Yükle (Install) üzerine tıklayın.</p>
			
<p>6. GxPicture yazılımını Panoramik ünite için kurarken sizden maske dosyasını yüklemeniz istenebilir.</p>	<p>7. GXS-700 yazılımının yüklenmesi, kurulumun sonunda düzeltme dosyalarının da ayrı bir CD'den yüklenmesini ister.</p>	<p>8. GXC-300 veya GXS-700 kurulumu yapılırken, cihazın bir USB bağlantı noktasına takılmasını söyleyen bir istem görüntülenir.</p>	<p>9. Tüm dosyalar yüklendikten sonra, yüklemeyi tamamlamak ve bilgisayarı yeniden başlatmak için Next (İleri) düğmesini tıklayın.</p>
			

Notlar: Orthoralix DDE ünitesini kurarken, GxPicture kurulumu tamamlandıktan sonra Dijital Modül Ünitesi Yapılandırma CD'sini yükleyin. Kurulum tamamlandıktan sonra standart kullanıcı hesabını kullanın.

GxPicture yazılımının önceki sürümlerini yeni sürümüne yükseltirken, mevcut tüm KaVo/Gendex sürücülerini otomatik olarak tespit edilir ve en yeni sürümüne yükseltilir. Yeni cihazlar eklemek için sürüm yükseltmesinden sonra GxPicture CD'sini tekrar takın.